

KRYOBEHÄLTER ARPEGE 70 GAS

Hergestellt in Frankreich



- Kryobehälter mit einer durchschnittlichen Lagerkapazität
- Konservierung von Bio-Proben in der Gasphase
- Kapazität 15 l
- Hergestellt aus Aluminium

Labor & Analytik

Anwendung

ARPEGE-Behälter ermöglichen die Lagerung aller Arten von Proben in Stickstoff. Modelle, die mit dem Sereny T Box-System ausgestattet sind, gewährleisten maximale Probensicherheit durch lückenlose Temperaturrückverfolgbarkeit und kontinuierliche Überwachung.

Entwickelt für die Anwendung:

Stickstoff Gasphase bei tiefkalten Temperaturen (<-170°C)

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Diese Produktreihe minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen während der Flüssigstickstoffphase. Erhöhte Sicherheit für den Endverbraucher: keine Gefahr von Verbrühungen durch Flüssigstickstoffspritzer.

Statische Verdunstung Haltezeit	21 d*
Durchmesser Eintritt	215 mm
Tägliche Verdunstung	0.7 l/Tag*
Gewicht leer	48 kg**
Gewicht voll	59 kg**
Kapazität Pallietten:	7480 x 0,25 ml - 2720 x 0,5 ml - 2380 CBS

2-ml-Tuben (pro Box mit 100 Tuben
– 4 Racks mit je 5 Ebenen)..... 1600

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

**Ohne Equipment bzw. Zubehör

Highlights

Vielseitig:

Lagerung in Regalen oder Kanistern

Sichere Handhabung:

Individuelles Verschlusssystem für jede Box

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Länge (L) : 586 mm

Höhe (H) : 921 mm

Tiefe (D) : 673 mm

Nettogewicht : 48 kg

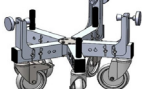
Bedienungsanleitung

OP ARPEGE

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
217477	O-ARP70-G-ITNR-RS/420+MEMO+KD-Non med	N2	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	136685	Rollenuntersatz für Arpege-Serie Arretierbarer Rollenuntersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Cryobehälter aus der TP/ TR-Serie. Für die Modelle Arpege 70/110/140/171

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHAEALTER Kit zur Arretierung von 3 Rollen

Ersatzteile

Material-nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
217477	116243	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 70/ 110/ 140/ 170